


Высокочастотная хирургия

Микропинцет ERBE

БИПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ И ПРЕПАРИРОВАНИЕ
С ВЫСОЧАЙШЕЙ ТОЧНОСТЬЮ
МИКРОПИНЦЕТ ERBE

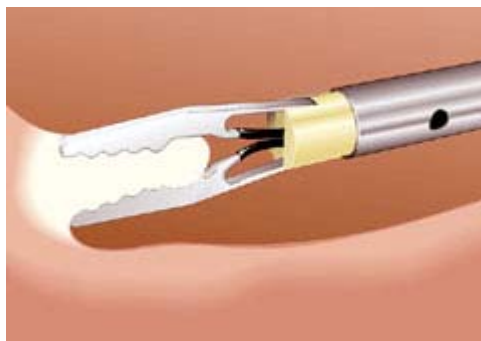

ERBE

БИПОЛЯРНЫЙ МИКРОПИНЦЕТ ERBE

ЗАХВАТЫВАНИЕ, РАЗВЕДЕНИЕ, ПРЕПАРИРОВАНИЕ И БИПОЛЯРНАЯ КООГУЛЯЦИЯ – ВСЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВСЕГО ЛИШЬ ОДНИМ ИНСТРУМЕНТОМ!




Микропинцет ERBE находит широкое применение в минимально-инвазивной нейрохирургии (МИН) и в других областях минимально-инвазивной хирургии. Бранши инструмента раскрываются из сомкнутого положения (диаметр стержня 1,5 мм) на величину до 6 мм.




Захватывание и коагуляция

Для предупреждения травм и исключения повреждений тканей при позиционировании микропинцета его бранши всегда находятся в сомкнутом положении. Бранши микропинцета раскрываются только при нажатии на рычаг.

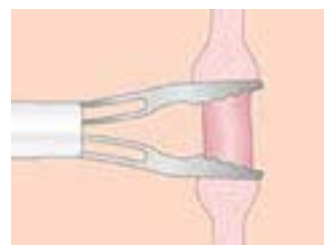

Разведение...


Новая шарнирная конструкция микропинцета ERBE и его прецизионное исполнение (фирмой ERBE подана заявка на патент) гарантируют Вам возможность спокойной и уверенной работы. Стержень и бранши жестко зафиксированы относительно друг друга. Микрогабаритный диаметр стержня обеспечивает хороший обзор операционного поля.

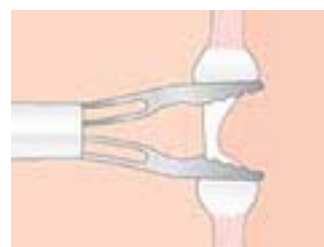

... и коагуляция

Микропинцет может применяться с любыми аппаратами ICC-серии в режиме AUTO BIPOLAR и с VIO-системой в режиме BIPOLAR SOFT.

Очистку и промывку инструмента и рукоятки можно производить отдельно друг от друга.

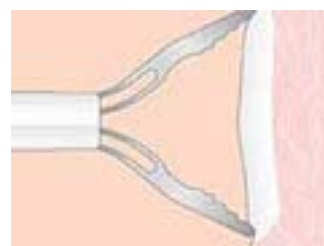

Контактная коагуляция

Микропинцет, биполярный Ш1,5 мм, длина 360 мм макс. рабочее напряжение 180 В

Арт. № 20 291-401

Микропинцет, биполярный Ш1,5 мм, длина 280 мм макс. рабочее напряжение 180 В

Арт. № 20 291-408

Микропинцет, биполярный штыковидный Ш1,5 мм, длина 160 мм макс. рабочее напряжение 180 В

Арт. № 20 291-406

Рукоятка для микропинцета (без рис.) с биполярным штекером, кабель 4 м

Арт. № 20 291-407

Адаптер для промывки микропинцета (без рис.)

Арт. № 20 291-404



МЕД СОЮЗ

многоканальный номер
+7 (495) 308-9009
www.medsoyuz.ru
E-mail: ru@medsoyuz.ru