


Medio Laser combi

- Непрерывное лазерное излучение – длина волн 650, 780, 810 и 830 нм, мощность, соответственно, 30, 50, 100, 200 и 500 мВт
- Пульсирующее биостимулирующее лазерное излучение – длина волн 904 нм, средняя мощность 20 мВт, максимальная мощность 20 Вт
- «Лазерный душ» для быстрого и точечного лечения
- Наличие гастроэнтерологических, дерматологических и гинекологических щеточек
- Эффективный способ лечения проблем, как на поверхности тела, так и глубоко в ткани

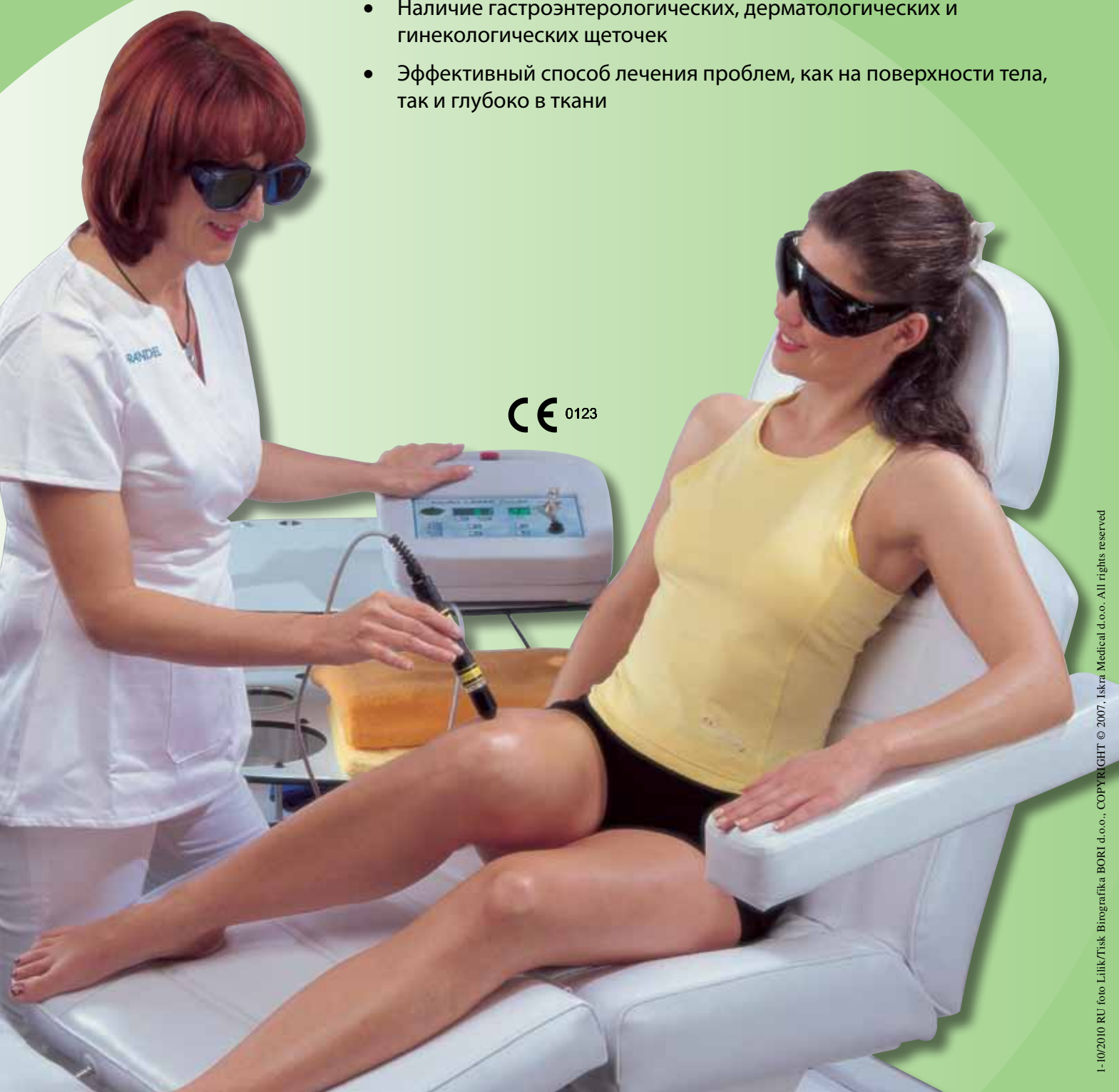

CE 0123

Medio Laser combi

«**MEDIO LASER COMBI**» универсальный аппарат для лазерной терапии низкой частоты (непрерывное, пульсирующее излучение). Пульсирующее излучение с частотой волны 904 нм, предоставляет возможность транслировать больше объема энергии глубоко в ткань организма быстрее, чем в любом другом случае. Энергия используется для лечения проблем, связанных с функционированием скелетной системы, для лечения травм и боли глубоко в тканях организма. Несущая мощность 6400 Гц транслируется в лучах с регулируемой мощностью 1 – 3200 Гц. Максимальный уровень мощности составляет 20 Вт, средний уровень мощности 20 мВт. Продолжительность процедуры зависит от объема транслируемой энергии и автоматически регулируется самым аппаратом.



«**MEDIO LASER COMBI**» дает терапевту возможность выбора среди различных видов лазерного излучения (длина волны 650, 780, 810, 830 нм; мощность 30,50, 100, 200 и 500 мВт, соответственно). Наличие различных щеточек, специально созданных для использования в гастроэнтерологических, дентальных, дерматологических и гинекологических целях облегчает доступ к трудным местам организма пациента. Для лечения больших пространств рекомендуется использовать «лазерный душ», покрывающий площадь 10 – 20 см². Использование такой опции существенно сокращает время и затраты на лечение.



«Лазерный душ»

Технические данные:

Модель:	MEDIO LASER COMBI
Код:	1800280
Тип лазерного излучения:	GaAlAs, GaAs
Рабочий режим:	Непрерывной, импульсный
Непрерывное излучение	
Длина волны:	650, 780, 810, 830 нм
Средняя мощность:	30 мВт, 50 мВт, 100 мВт, 200 мВт, 500 мВт
Пульсирующее излучение	
Длина волны:	904 нм
Средняя мощность:	20 мВт
Максимальная мощность:	20 Вт
Длина импульса:	200 нс
Материал:	Полистирол PS 06
Цвет материала:	Серебристый
Габариты:	300 x 300 x 140 мм
Вес:	1,8 кг

Электротехнические характеристики:	230 В, 50/60 Гц
Мощность:	24 ВА
Предохранители:	2 x 125 мАТ
Классификация по IEC 60601/1:	Класс I, Тип ВF
Классификация по MDD 93/42/EEC:	IIB
Класс лазерного излучения:	3B

Базовая комплектация:

-Защитные очки для терапевта	1 шт.
-Защитные очки для пациента	1 шт.
-Щетка для акупунктуры	1 шт.
-Сетевой кабель (230 В, EURO plug)	1 шт.
-Руководство по обслуживанию	

Дополнительные комплектующие части:

Непрерывные и пульсационные излучатели, «лазерный душ», различные щетки

Iskra Medical d.o.o. Stegne 23, 1000 Ljubljana, Slovenia, phone: ++386 (0)1 513 15 00,
513 15 04, fax: ++386 (0)1 513 15 10, mobile: ++386 41 622 918,
E-mail: medical@iskramedical.eu, <http://www.iskramedical.eu>

МЕД СОЮЗ

+7 (495) 308-9009
многоканальный
www.medsoyuz.ru
E-mail: ru@medsoyuz.ru

